



FICHE D'INSTRUCTION TECHNIQUE

TRANSPORT PEDIATRIQUE PEDI-MATE

Diffusion

Spécialistes

SSSM

Officiers

Sous-Officiers

Personnels du rang

CTA/CODIS

X

X

X

X

Code FIT/SAP/19.07.19.146

PRÉSENTATION

Objectif :

Assurer le transport en position **demi-assise** d'enfants, **non traumatisés**, d'un poids compris entre **4,5 et 18 kg**

Marque : FERNO

Modèle : PEDI-MATE 678

Valeur : 280 euros

Caractéristiques techniques :

- Matière : Vinyle non toxique
- conditionnement : 80x48 cm
- poids : 1,1 Kg
- s'enroule sur lui-même pour un stockage compact



SÉCURITÉ / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


Sécurité :

- s'assurer que l'ensemble des sangles soit bien attaché et que le dispositif soit solidaire du brancard



MISE EN ŒUVRE / MODALITÉS

Mise en œuvre :


- détacher les sangles du brancard et retirer le Matelas Immobilisateur à Dépression (M.I.D)
- redresser le dossier du brancard entre 15 et 45 degrés afin de garder les épaules de l'enfant plus hautes que le bassin
- positionner le PEDI-MATE à plat et desserrer les sangles de fixation
- attacher la sangle noire (niveau des épaules) à l'arrière du dossier du brancard

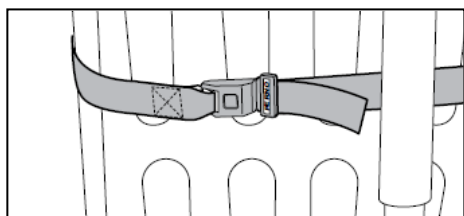


- fixer les autres sangles latérales noires au cadre du brancard

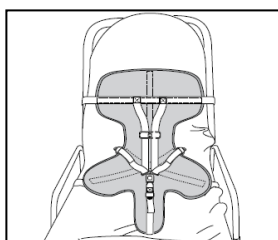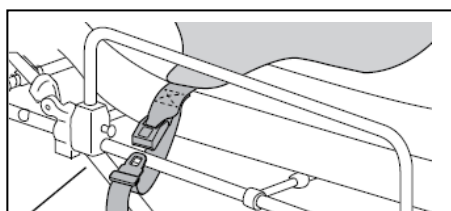



- installer l'enfant et ajuster le PEDI-MATE pour que **la sangle noire soit au niveau des épaules**
- serrer la sangle noire des épaules au maximum jusqu'à ce que le matelas soit comprimé
- serrer les sangles latérales noires au maximum de façon à ce que le PEDI-MATE soit solidaire du brancard
- passer les bras de l'enfant dans les deux bretelles
- passer la boucle centrale entre les jambes de l'enfant et la positionner sur l'abdomen
- clipser les bretelles dans la boucle centrale

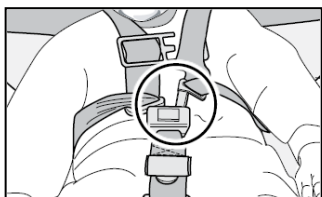

- passer la bretelle gauche dans le clip de poitrine et positionner ce dernier au niveau des aisselles

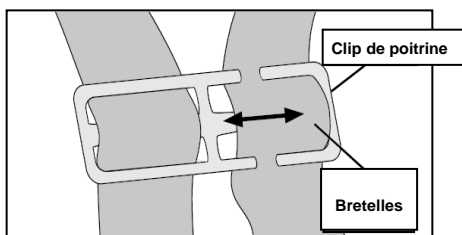

- serrer les bretelles et la sangle d'entre jambe de manière à ce que l'enfant ne bouge plus

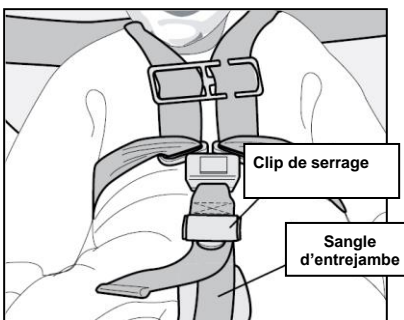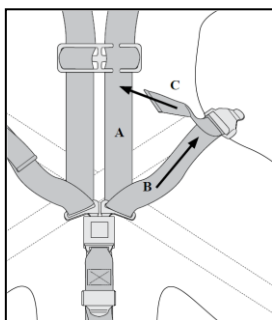

- vérifier le serrage correct de l'ensemble des sangles avant la mise en mouvement du VSAV

RECONDITIONNEMENT / MAINTENANCE

Reconditionnement :

- nettoyage du PEDI-MATE avec le désinfectant de surface (DDSH)
- séchage
- rouler sur lui-même
- attacher les sangles de maintien



Maintenance :

- vérification semestrielle de l'état des sangles et des clips de fixation

Rédacteurs :	Sch Stéphane DUBOIS Adc Cédric CADORET	Le Directeur Départemental SIGNÉ original conservé par le service Prospective et RETEX Opérationnel Colonel Ivan PATUREL	Date de création :	17/07/2019
Contrôleurs :	Ltn Hervé CHARRON Pharmacien Lcl Denis PILETTE		Date de mise à jour :	
Vérificateur :	Cdt François SARDAINE		N° version :	01
Approbateur :	Col Ivan PATUREL		Nombre de page :	2